



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## BRUKSANVISNING

# Rollator Support

### **Stark och funktionell rollator avsedd för den bariatriska användaren.**

Rollator Support är utvecklad till användare som väger upp till 200 kg.

Rollatorn kan användas både utomhus och inomhus, på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem. Rollatorn finns i två bredder.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

# Innehåll

1. Säkerhet .....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Montering.....	6
6. Inställningar.....	6
7. Rollator King .....	7
8. Rengöring och underhåll .....	8
9. Bortskaffning .....	8
10. Garanti .....	9
11. Specifikationer.....	10
12. Beställning.....	11

# 1. Säkerhet

---



## Varning

Rollator Support får inte användas utan instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användandet av rollatorn. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan rollatorn används. Rikta speciellt uppmärksamheten mot säkerhetsvägledningar markerade med

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller för personskador förorsakade av felaktig användning av Rollator Support.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om Rollator Support är skadad eller har felaktigheter. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.



## SÄKERHETSVÄGLEDNING

Aktivera rollatorns bromsar innan den används till att sitta och vila på.

Använd aldrig rollatorn i rulltrappor eller i vanliga trappor.

Använd aldrig rollatorn som en rullstol.

Använd aldrig rollatorn till att transportera stora saker. Transportera endast saker som kan ligga i transportkorgen.

Använd aldrig rollatorn på underlag som lutar med än 3,5°.

Använd aldrig rollatorn på våta eller ojämna underlag.




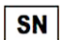





Dra alltid åt handvreden till höjjusteringen.












Låt bägge benen vila i marken när rollatorn används att sitta på. Det säkrar stabiliteten. Vicka heller inte rollatorn fram och tillbaka när den används att vila på.

Om produkten används till personer som väger mer än 200 kg finns det risk att rollatorn kan välta eller skadas.

Yttemperaturen kan stiga när rollatorn utsätts för externa värmekällor, till exempel solljus.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet för medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Max. användarvikt
	Läs manual
TBA	Offentliggörs senare
CE-etiketten är placerad på rollatorns ram. Exempel på etikett kan ses härunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Rollator Support 0173-050-000			200 KG
	2000741		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av Rollator Support för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om Rollator Support.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varning.

Rollator Supports UDI-nummer framgår av etiketten på ramen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkten kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning


---

Rollator Support får endast användas av mobila användare som har såväl fysik som kognitiva förmågor att kontrollera att gå och bromsa rollatorn på ett säkert sätt.

Rollator Support är avsedd för användare som väger upp till 200 kg. Rollatorn kan användas utomhus och inomhus på institutioner, vårdcentraler och i privata hem.

De höjdbarbara underarmsstöden hjälper användaren att gå i upprätt läge och ökar avlastningen på handlederna.

Rollatorn kan användas som stol när bromsarna är låsta.

 Använd aldrig Rollator Support på våta eller ojämna underlag.

Konsultera alltid en förskrivare innan Rollator Support rekommenderas till en användare.

### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer i samband med användningen av produkten som rollator eller stol.

### 4.1 Mer användning

Rollator Support finns i två bredder, 61 cm och 71 cm. Bredden avser mellanrummet in till sitsen och avspeglar avståndet mellan handtagen.

Båda modeller har en sitsbredd på 51 cm, en sitshöjd på 51 cm och ett sitsdjup på 37 cm.

Den totala bredden på de två modellerna är 13 cm mer än avståndet mellan handtagen.

Var uppmärksam på att modellen med den totala bredden på 84 cm kan ha svårt att komma igenom vissa dörröppningar.

#### Val av modell till användare

Valet av modell är beroende av användarens kroppsform. Till användare med päronformad kroppsform rekommenderar vi en rollator i storlek 71 cm. Kontakta gärna Cobi Rehab på 08-702 97 74 för råd och vägledning innan beställning.

Ta alltid måtten på användaren i stående position. Placera till exempel en bok eller liknande på den sida av användaren där användaren är bredast. Mät sedan avståndet mellan de två böckerna.

#### Att gå med Rollator Support

1. Placera händerna på handtagen. Släpp bromsarna.
2. Kliv sedan försiktigt fram, en fot i taget.
3. Se till att ytan är slät så det är lättare att gå. Var uppmärksam och var försiktig med hinder / håll i vägen / underlaget.
4. Använd bromshandtagen för att stanna.

Använd aldrig rollatorn på sluttande ytor som är mer än 3,5° eller på mjuka och ojämna underlag.

## 5. Montering

---

Kartongen innehåller förutom rollatorn även två handtag (anslutna till rollatorn med kablar), två stänger med underarmsstöd, en korg och ett säkerhetsryggstöd

1. Fäll ut rollatorn.
  2. Ta bort höjjusteringskruvarna från handtagsstängerna.
  3. Fäst stängerna med underarmsstöden på rollatorn.
  4. Sätt in handtagen i underarmsstöden.
  5. Montera säkerhetsryggstödet på framsidan av rollatorn genom att dra upp knappen på höger respektive vänster sida.
- Knappen kan låsas vilket gör det lättare att montera fästet. Detta görs genom att dra upp knappen och vrida det ett kvarts varv.

Kom ihåg att lossa knappen igen så att säkerhetsryggstödet sitter säkert.

6. Förvaringskorgen monteras framtill genom att hänga upp korgens krokar på det översta röret under sitsen.
7. Justera höjden på handtagen för att anpassa till användaren.
8. Justera bromsarna.

⚠ Använd inte rollatorn utan att ryggsäkerhetsstången är fastmonterat.

Ryggsäkerhetsstången säkrar att belastningen på rollatorn inte hamnar för långt fram. Om detta skulle ske kan rollatorn tippa framåt.

⚠ Lägg inte kuddar ovanpå den polstrade sitsen när rollatorn används.

## 6. Inställningar

---

### Justering av höjden på handtagen/underarmsstöden

1. Ta bort skruven och höjjusteringsvredet från båda handtagen så att handtaget kan röra sig fritt upp och ner.
2. Skjut handtagen uppåt eller nedåt tills önskad höjd uppnås. Sätt i skruv och vred. Placera bulten på baksidan så att den passar i hålet.
3. Spänn till.
4. Justera höjden på handtagen så att handtagen ligger i området mellan höftleden och revbenets nedre del. Observera att båda handtagen är lika höga. Ojämn höjd kan leda till instabilitet.

### S Hopfällning av rollatorn

1. Ta tag i sitsens framkant (den kant som är närmast dig) med en hand. Håll i ett av handtagen med den andra handen.
2. Lyft upp sitsen.
3. Rollatorn viker sig nu.

Om rollatorn behöver ta ännu mindre plats vid hopfällningen kan transportkorgen och ryggsäkerhetsstången monteras av.

### Användning av bromsarna

Rollator Support kan bromsa på två sätt:

1. Korttidsstopp:

Tryck båda handtagen uppåt.

2. Längre stopp:

Tryck ner båda bromshandtagen så att de låser i nedre läge. Handtagen förblir i detta läge tills de aktivt trycks upp igen.

### Översyn av bromsarna

Bromsarna är korrekt inställda vid leverans.

Bromsarna och parkeringsprobromsen ska kontrolleras innan rollatorn tas i bruk.

Om parkeringsbromsen inte kan låsas eller om bromsarna inte fungerar korrekt, kontakta Cobi Rehab på 08-702 97 74.


Bromsarna ska ses över var 3:e månad.

## 6.1 Transport i motorfordon

Rollator Support kan lätt fällas ihop om den ska transporteras i ett motorfordon.

1. Tag tag i sitsens framkant med ena handen, håll en hand på ena handtaget.
2. Lyft upp sitsen och fäll ihop rollatorn.

Om rollatorn behöver ta liten plats kan transportkorgen och ryggsäkerhetsstången tas av.

 Rollator Support får inte användas som sittplats i ett motorfordon.

## 6.2 Förvaring och långtidsförvaring

Rollator Support bör förvaras mörkt och övertäckt med en filt eller liknande.

Rollator Support bör temperaturmässigt förvaras mellan -10° - 50°C.

Kontrollera med jämna mellanrum att rollatorn inte blivit våt eller fått någon annan skada under förvaringen.

# 7. Rollator King

---

Vår andra bariatriska rollator, Rollator King påminner i sin konstruktion om Rollator Support.

Rollator King har dock handtag i stället för underarmsstöd och en max användarvikt på 325 Kg.

Om användaren i stället behöver en Rollator King kan underarmsstöden tas bort och ersättas med handtag.

Kontakta Cobi Rehab för mer information om borttagning av underarmsstöd.



## 8. Rengöring och underhåll

---

### 8.1 Rengöring och desinficering

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

#### Desinficering

Rollatorns chassi, sits, handtag, underarmsstöd och ryggsäkerhetsstång kan också desinficeras med 70% ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

Sits och ryggsäkerhetsstång kan bytas ut när rollatorn ska användas av en annan användare.

⚠ Desinficera alltid Rollator Support om den ska användas av en annan användare. Detta för att undvika korskontaminering.

⚠ Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

### 8.2 Underhåll

Bultar och vred ska kontrolleras var tredje månad. Spänn åt dem om det behövs.

Kontakta Cobi Rehab för ytterligare information kring underhåll av Rollator Support.

⚠ Bristande underhåll av bultar och vred kan leda till funktionsfel.

## 9. Bortskaffning

---

När Rollator Support inte längre är i bruk ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffningen.

#### Återanvändning

Delar av Rollator Support kan återanvändas. Kontakta Cobi Rehab för mer information.



# 10. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att Rollator Support är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan finnas skador eller saknas något på rollatorn vid leverans, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för Rollator Support är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.

- produkter där det gjorts en reparation av icke auktoriserad personal.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

## 10.1 Oförutsedda händelser

Varje incident som inträffar i samband med användningen av Rollator Support ska meddelas till Cobi Rehab.

## 10.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.


Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet för produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten använts och hur sliten den är.

Den samlade bedömningen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att rollatorn blivit hanterad på ett felaktigt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och använda reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

 Brist på underhåll kan skada rollatorn, förkorta livslängden eller påverka rollatorns prestanda.

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning.

Efter förväntad livslängd är det viktigt att en helhetsbedömning av produkten görs innan fortsatt användning.

# 11. Specifikationer

<b>Modell 61 cm och 71 cm</b>	
Max användarvikt	200 kg
Total längd	850 mm
Total bredd	740/840 mm
Bredd mellan handtag	610/710 mm
Höjddjusterbar i intervaller av 2,5 cm	100 - 130 mm
Sittbredd	510 mm
Sittdjup	370 mm
Öppning in till sits	610/710 mm
Sitshöjd	510 mm
Vikt	15,7 kg
Max vikt i transportkorg	5 kg
Hopfällbar	Ja
Massiva hjul	Ja
Chassi	Krom molybden stål/SAE41-30
Chassi och sits	Brandsäkert
Sits och ryggpolstring	Polyuretanskum
Hjul	8" massiva
Förväntad livslängd	7 år
ISO-klassifikation	ISO 12 06 06 - 11
Riskklass	I
Grundläggande UDI	5740000100007N8
Yttemperaturen på rollatorn kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 12. Beställning

---

Modell	Öppning in till sits	Totalbredd	Artikelnummer
Rollator Support 61, inkl. korg	610 mm	740 mm	0173-050-000
Rollator Support 71, inkl. korg	710 mm	840 mm	0173-071-000
Handtag till King modell, vänster			0170-999-010L
Handtag till King modell, höger			0170-999-010R



# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## **TILLVERKARE**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## **LEVERANTÖR**

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
112 59 Stockholm  
08-702 97 74

[WWW.cobirehab.se](http://WWW.cobirehab.se)

