



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## BRUKSANVISNING

# MiniMaxx Rullstol

**Hopfällbar, robust och manuell rullstol utvecklad till den bariatriska användaren.**

MiniMaxx Rullstol är framtagen till användare som väger upp till 325 kg. Rullstolen kan användas både inomhus och utomhus och används på sjukhus och omsorgsboenden. Den finns i fyra sittbredder, 56 cm, 61 cm, 66 cm, and 71 cm.



Cobi Rehab och Cobi Rehabs leverantörer följer FN:s konventioner om barn- och tvångsarbete och ILO 029, C132 samt C182.

# Innehållsförteckning


1. Säkerhet.....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Inställning .....	6
6. Rengöring och underhåll.....	8
7. Bortskaffning .....	8
8. Garanti.....	9
9. Specifikationer .....	10
10. Beställning .....	11

# 1. Säkerhet

---

## **VARNING**

MiniMaxx Rullstol får inte användas utan en grundlig instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i användningen av MiniMaxx Rullstol. Vid felaktig användning kan användare och rullstol ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas grundligt innan MiniMaxx Rullstol tas i bruk. Rikta speciellt din uppmärksamhet vid säkerhetsvägledning markerade med .

Cobi Rehab påtager sig inget ansvar för eventuella skador på produkten eller vid personskador förorsakade av felaktig användning av MiniMaxx Rullstol.

Kontakta Cobi Rehab omedelbart om rullstolen är skadad eller har brister. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för oförutsedda situationer som kan uppstå efter reparationer företagna utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.

## **SÄKERHETSVÄGLEDNING**

MiniMaxx Rullstol kan tippa, förorsaka skada eller gå sönder om brukarvikten (325 kg) överskrides.

Använd aldrig MiniMaxx Rullstol på våta eller ojämna underlag.

Stå inte på benstöden vid in- och urstigning. Rullstolen kan välta med risk för skada på användaren.

Var uppmärksam på att modeller med en totalbredd på över 85 cm kan ha svårt att komma igenom vissa dörröppningar.

Bägge hjulbromsar ska vara aktiverade vid förflyttning in och ut ur MiniMaxx Rullstol.




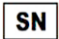





Justering av tyngdpunkt bör göras av utbildad personal.












MiniMaxx Rullstol får inte användas som sittplats i ett motorfordon.

Desinficera alltid MiniMaxx Rullstol om den ska användas av en annan person. Detta bör göras för att undvika korskontaminering.

Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller påverka rullstolens prestanda.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter, EU 2017/745
IP31	Ingress Protection Ratings Guide
	Cobi artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning, klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-etiketten är placerad på rullstolens nedersta ram. Exempel på etikett kan ses nedan.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	Minimaxx 0110-056-000			325 KG
	0050130		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om användningen av MiniMaxx rullstol för anpassad målgrupp. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning finner du på vår hemsida. Kontrollera att den version du sitter med nu är den senaste.

Om du har behov av en bruksanvisning med större skrift finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](https://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp skriftstorleken.

Du kan alltid kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar fler upplysningar om MiniMaxx Rullstol.

Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra i produktspecifikationerna utan föregående varning.

MiniMaxx UDI-nummer framgår av etiketten på ramen.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på hemsidan under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning

---

MiniMaxx Rullstol används till bariatrisk användare som har fysiken och de kognitiva egenskaperna att föra fram rullstolen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

MiniMaxx Rullstol har en maximal användarvikt på 325 kg. Rullstolen kan användas både utomhus och inomhus på sjukhus och omsorgsboenden.

⚠ MiniMaxx Rullstolen kan tippa, förorsaka skada eller gå sönder om den används av användare som väger mer än 325 kg.

### 4.1 Mer användning

Benstöden på MiniMaxx Rullstol kan bära 100 kg vardera. De är justerbara i sidled vilket betyder att de kan ställas in till användare med mycket hud på insidan av låren.

Rullstolens drivhjul kan justeras i förhållande till användarens tyngdpunkt. Körhandtagens utformning gör det lättare för omsorgspersonal att manövrera rullstolen.

MiniMaxx Rullstol finns i fyra sittbredder, 56 cm, 61 cm, 66 cm och 71 cm.

Gemensamt för samtliga är en sitshöjd på 43 cm och ett sitsdjup på 46 cm.

Totalbredden på alla modeller är 14 cm mer än sitsbredden.

⚠ Använd aldrig MiniMaxx Rullstol på våta eller ojämna underlag.

⚠ Ställ dig aldrig på benstöden vid in- och urstigning ur rullstolen. Rullstolen kan tippa med risk för skada för användaren.

Konsultera alltid en förskrivare innan MiniMaxx Rullstol rekommenderas till en användare.

#### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer i samband med användningen av produkten.

⚠ Var uppmärksam på att modeller med en totalbredd över 85 cm kan ha svårigheter att ta sig igenom vissa dörröppningar.

#### Val av storlek till användare

Valet av storlek är avhängigt användarens kroppsform. Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 för råd och vägledning innan beställning.

Måttagningen av användare görs alltid i sittande på ett fast underlag. Placera till exempel en bok eller något motsvarande på sidan av användaren där personen är som bredast. Mät sedan avståndet mellan de två böckerna.

## 5. Inställning

---

De nedan beskrivna justeringarna hjälper till att anpassa komforten i MiniMaxx Rullstol till den enskilda användaren. Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta efter justeringen.

### Verktyg

Insexnycklar: 5 mm (två).

### Benstöd

Längden på benstöden justeras med användaren sittandes i stolen.

1. Lossa bulten på baksidan av benstödsröret och dra ut den.
2. Skjut benstöden upp eller ner vid behov tills önskad höjd är uppnådd.
3. För in bulten genom benstödsröret igen och dra åt den.

Benstöd justeras i sidled med användarens fot på benstödet.

1. Lossa fingerskruven under benstöden.
2. Skjut benstödet ut mot sidan eller in mot mitten och spänn åt fingerskruven.

⚠ Fingerskruvarna under benstöden ska alltid vara korrekt monterade i hålen under benstödshållaren. Dra inte åt fingerskruvarna på benstödshållaren utanför hålen.

⚠ Stå inte på benstöden då detta kan få rullstolen att tippa framåt.

⚠ Lyft inte rullstolen i benstöden då dessa inte sitter fast. Dom är gjorda för att kunna tas av.

⚠ Benstöden bör tas bort vid förflyttning in och ur stolen.

### Remrygg

Remryggen anpassas till användaren genom att lossa och dra åt de tvärgående remmar bak på ryggstödet.

1. Lossa bakstycket på baksidan av ryggstödet och lossa på remmarna - mestadels nedtill.
2. Placera användaren långt bak i rullstolen så att de övre remmarna stödjer den övre delen av ryggen.
3. Dra sedan åt remmarna för att ge stöd i nedre delen av ryggen. För användaren med en stor bakdel ger denna inställning stöd i ländryggen.

Fäst bakstycket med kardborren efter justeringen.

### Körhandtag

Anpassa körhandtagen till den som skjuter rullstolen genom att justera dem uppåt eller nedåt.

1. Lossa skruvarna på baksidan av röret under körhandtaget och ta ut dem.
2. Flytta körhandtaget uppåt eller nedåt efter behov och sätt sedan i skruvarna igen. Se till så att skruven kommer hela vägen genom det bakre röret.
3. Dra åt skruvarna.

### Hjulbromsar

Hjulbromsen aktiveras genom att skjuta bromsspaken framåt. Bromsen är steglöst inställbar.

Lossa skruvarna på bromsfästet och skjut bromsen bakåt eller framåt så att bromsen trycks in 3 - 5 mm i däcket vid aktivering. Dra åt skruvarna ordentligt.

⚠ Kontrollera alltid rullstolens hjulbroms innan användning.

⚠ Byt ut slitna eller skadade hjulbromsar

⚠ Justera hjulbromsen om tyngdpunkten korrigerats.

⚠ Båda hjulbromsar måste vara låsta när du går in och ut MiniMaxx Rullstol.

### Justering av tyngdpunkt

Drivhjulens position kan justeras efter användarens tyngdpunkt. Det underlättar körningen av rullstolen.

1. Ta bort drivhjulet genom att ta bort bulten.
2. Ta bort muttrarna på insidan av axelbussningen och placera axelbussningen i önskat läge i ramen.
3. Dra åt muttrarna på insidan.
4. Flytta bromsen framåt eller motsvarande framåt eller bakåt.

Montera drivhjulen och justera bromsarna enligt avsnittet **Hjulbromsar**.

Justera tippskydden såsom det anges i avsnittet **Tippskydd** nedan.

⚠ Justering av tyngdpunkt bör endast utföras av utbildad personal.

⚠ Ta aldrig bort tippskydd.

### Stabilitet och balans

Rullstolen är utformad till att hålla sig upprätt under normala dagliga aktiviteter så länge användaren inte rör sig bortom tyngdpunkten.

## 5. Inställning, fortsättning

### Justering av anti-tipp

Tippskyddens position kan justeras i förhållande till drivhjulen så att rullstolen inte tippas bakåt. Tippskyddets läge justeras när rullstolen är tom.

1. Lossa skruvarna på rullstolsramen över tippskyddet och ta bort dem.
2. Flytta tippskyddet uppåt eller nedåt efter behov och sätt sedan tillbaka skruvarna. Se till så att skruven går hela vägen igenom röret.


3. Spänn åt skruvarna.

Luta rullstolen bakåt och kontrollera så att tippskydden hindrar rullstolen från att tippa bakåt.

## 5.1 Hopfällning vid transport

MiniMaxx Rullstol kan fällas ihop vid transport i motorfordon.

1. Ta bort sittkudden.
2. Ta tag i sätets mitt med en hand. Dra upp sätet, varefter rullstolen drar ihop sig.

 MiniMaxx Rullstol får inte användas som sittplats vid transport i ett motorfordon då rullstolen inte är krocktestad.

## 5.2 Förvaring (inkl. långtidsförvaring)

MiniMaxx Rullstol bör långtidsförvaras mörkt och övertäckt med en filt eller liknande.

MiniMaxx Rullstol bör temperaturmässigt förvaras mellan -10° - 50°C.

Kontrollera regelbundet att rullstolen inte har blivit våt eller fått andra skador vid förvaringen.



## 6. Rengöring och underhåll

---

### 6.1 Rengöring och desinficering

Rullstolens ram, sits, körhandtagen samt remryggen ska rengöras med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

⚠ Vid genomfuktning av slaget på remryggen reduceras den brandsäkra effekten.

#### Desinficering

Rullstolens ram, sits, körhandtag och remrygg kan också desinficeras med ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000 - 1200 ppm.

Rullstolskudden kan bytas ut när rullstolen övergår till en ny användare.

⚠ Desinficera alltid MiniMaxx Rullstol om den ska övergå till en ny användare. Detta för att förhindra korskontaminering.

Eventuella lokala hygien- och underhållsrutiner ska alltid följas.

### 6.2 Underhåll

1. Kontrollera att bultar och skruvar är fastspända innan MiniMaxx Rullstol tas i bruk. Kontrollera rullstolens alla delar för att undgå slitage och skador.

2. Håll axlarna fria från smuts så att mekanismen kan låsas korrekt och hjulen vridas fritt.

3. Var noga med att olja axlarna minst en gång i månaden (använd 3-i-1 olja eller liknande).

4. Hjul och däck bör kontrolleras regelbundet för sprickor och slitage och bytas ut vid behov.

5. Kontrollera regelbundet att drivringarna är ordentligt fastspända på hjulet.

⚠ Brist på underhåll av bultar och muttrar kan leda till funktionsfel.

Kontakta Cobi Rehab för ytterligare information om underhåll av MiniMaxx Rullstol.

## 7. Bortskaffning

---

När MiniMaxx Rullstol inte längre är i bruk ska den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information kring bortskaffning.

#### Återvinning

Delar av MiniMaxx Rullstol kan återvinnas. Kontakta Cobi Rehab för mer information.



## 8. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att MiniMaxx Rullstol är felfri när den levereras. Skulle det mot förmodan vara fel eller brister på MiniMaxx Rullstol vid leveransen, kontakta Cobi Rehab omedelbart.

Garantiperioden för MiniMaxx Rullstol är ett år från köpedatum och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller inte:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller skadats väsentligt.

- produkter som reparerats av ej auktoriserad person.

Garantin omfattar inte:

- slitagedelar.

Garantin gäller inte om Cobi Rehab bedömer att MiniMaxx Rullstol blivit hanterat på ett olämpligt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både för service och använda reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada produkten, förkorta hållbarheten eller på annat sätt påverka rullstolens prestanda.

### 8.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar i samband med användningen av MiniMaxx Rullstol ska rapporteras till Cobi Rehab.

### 8.2 Efter förväntad livstid

Efter den förväntade livstiden är det viktigt att det sker en samlad bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livstiden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet för produkten då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd eller hur sliten den är.

Den samlade värderingen av produkten ska göras av utbildad personal såsom förskrivare eller hjälpmedelskonsulent. Som ett minimum ska det bedömas hur produkten är använd, produktens tillstånd och produktens samtliga komponenter

Cobi Rehab kan alltid göra en sådan bedömning.

## 9. Specifikationer

Max användarvikt	325 kg
Totalbredd	800 / 850 / 900 / 950 mm
Totalbredd hopfälld	410 mm
Totalhöjd med/utan körhandtag	1100 / 1003 mm
Totallängd utan benstöd	700 mm
Sitsbredd	560 / 610 / 660 / 710 mm
Sitsdjup	460 mm
Sitshöjd	430 mm
Rygghöjd	510 mm
Vikt	Ca. 27 kg
Armstöd avtagbara	Ja
Fotstöd och körhandtag, höjjusterbara	Ja
Fotstöd avtagbara	Ja
Brandsäkert överdrag	Ja
Drivhjul med quick release	Ja
Inställning av balanspunkt	Ja
Fast sits	Ja
Ram	Pulverlackerad krom molybden stål
Drivhjul	24", massiva
Länkhjul	125 mm nylon/PU
Sits/rygg	Polyester
Armstöd	Polyuretan
Fotstöd	PU-skum
Förväntad livslängd	7 år
ISO-klassifikation	12 22 03 08
Riskklass	I
Grundläggande UDI	5740000100001MU
Yttemperaturen på MiniMaxx Rullstol kan stiga och falla om den utsätts för yttre kyla eller värme.	

## 10. Beställning

---

<b>Modell</b>	<b>Sitsbredd cm</b>	<b>Sitsdjup cm</b>	<b>Artikelnummer</b>
MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd	56	46	0100-056-000
MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd	61	46	0100-061-000
MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd	66	46	0100-066-000
MiniMaxx Standard, inkl. fotstöd	71	46	0100-071-000
MiniMaxx med skivbromsar inklusive fotstöd	56	46	0109-056-000
MiniMaxx med skivbromsar inklusive fotstöd	61	46	0109-061-000
MiniMaxx med skivbromsar inklusive fotstöd	66	46	0109-066-000
MiniMaxx med skivbromsar inklusive fotstöd	71	46	0109-071-000
<b>Tillbehör</b>			
Sportarmstöd, par			0100-999-006
Amputationsbenstöd			0100-999-016
Bord universal			0100-999-001
O2 Syrgasflaska hållare 12,5-15 cm			0100-999-021
IV hållare			0100-999-008
<b>Reservdelar</b>			
Fotstöd standard, höger			0100-999-010
Fotstöd standard, vänster			0100-999-011



# **COBI REHAB**<sup>®</sup>

The Positioning Company

---



## **TILLVERKARE**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## **LEVERANTÖR**

**Cobi Rehab**  
Rålambsvägen 17  
11259 STOCKHOLM  
08-702 97 74

[cobirehab.se](http://cobirehab.se)